




MAY 2024

Светоотверждаемый временный пломбировочный материал

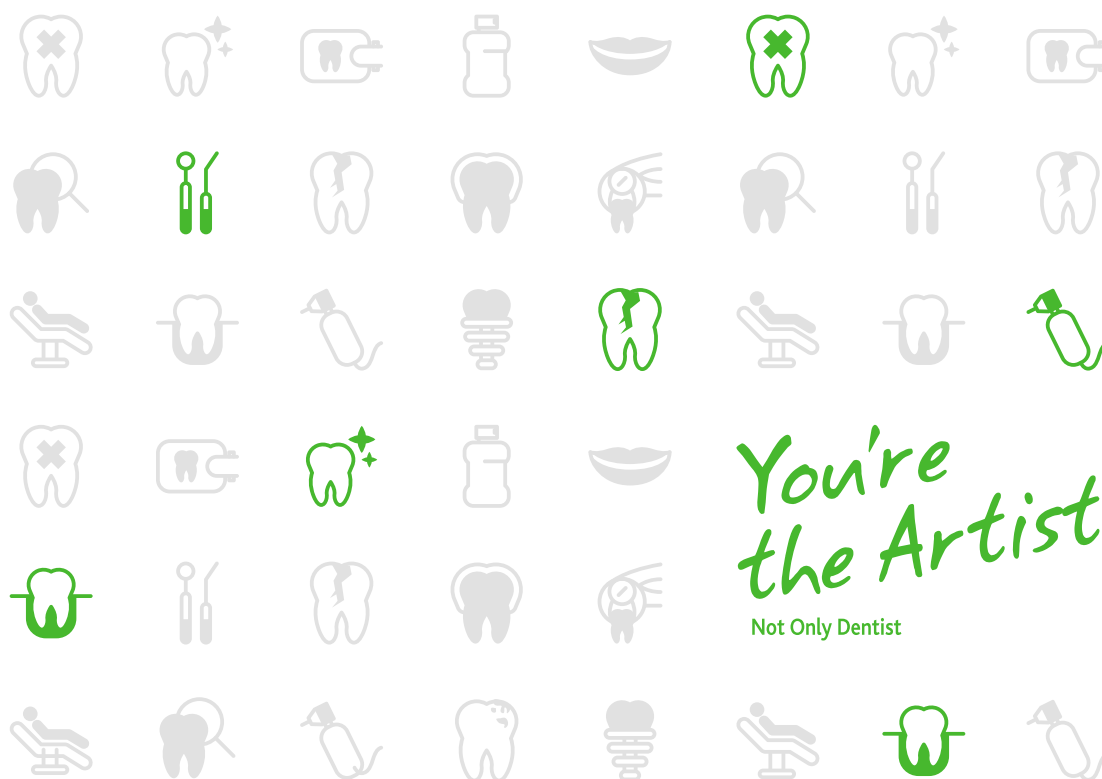

Temp•it Flow

Показания:

Временное пломбирование зубов.

Характеристики материала:

- Хорошее краевое прилегание
- Герметизация винта абатмента
- Легко вносится и легко удаляется цельной порцией
- Сохраняет границы препарирования
- Выдерживает жевательную нагрузку
- Устойчив к подтеканию слюны
- Особенно практичен при изготовлении вкладок и накладок
- Экономит время благодаря фотополимеризации
- Полимеризация - 20 сек

Цвета: Жёлтый, Голубой

Упаковка:

- 4 шприца по 1,2 мл
- Канюли - 8 шт

Применение



Temp•it

Показания:

Временное пломбирование зубов.

Характеристики материала:

- Идеален для вкладок и накладок
- Не прилипает к инструменту
- Легко вносится и легко удаляется цельной порцией
- Сохраняет границы препарирования
- Экономит время благодаря фотополимеризации
- Выдерживает жевательную нагрузку
- Полимеризационная усадка – 0,07 %
- Глубина отверждения – 10 мм
- Твёрдость – 95
- Полимеризация - 20 сек

Синий цвет пломбы приводит в восторг маленьких пациентов и не дает забыть взрослым о том, что лечение еще не закончено.



Цвета: Жёлтый, Голубой

Упаковка:

- 3 шприца по 3 г


Применение



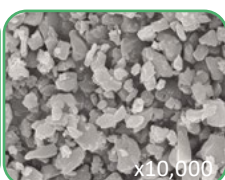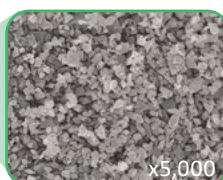


В композите EsFlow применяется Multi-Initiators система ускорения фотополимеризации. Основное преимущество Multi-Initiators системы заключается в обеспечении баланса высокой полимеризационной активности, которая позволяет сократить время полимеризации почти на 60% по сравнению со стандартными композитами, и относительно низкой чувствительности к рабочему освещению.

Принцип действия системы Multi-Initiators

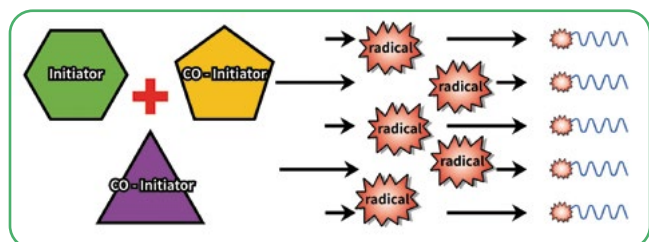

Мультиинициаторы обеспечивают радикальную реакцию, обеспечивая высокие скорости конверсии полимеризации.

Низкая чувствительность к рассеянному свету

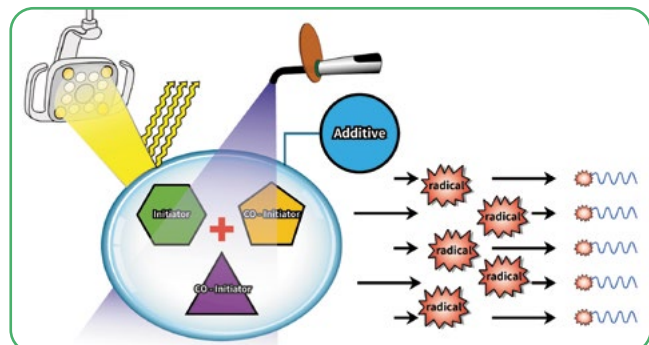

Добавка поглощает или блокирует окружающий свет, чтобы продлить время полимеризации на свету. В результате пользователь может иметь длительное время работы с EsFlow.

EsFlow

Показания:

- Реставрация III-V класса.
- Пломбирование молочных зубов
- Запечатывание фиссур
- Иммобилизация подвижных зубов
- Заполнение полостей при тоннельном препарировании
- Прокладка / база / заполнение поднутрений

Характеристики материала:


- Рентгеноконтрастен
- Выпускается по расцветке Vita
- Средний размер частиц от 16 нм до 0,7 мкм
- Высокая стойкость к абразивному износу
- Глубина отверждения – 2,69 мм
- Наполненность – 55 %
- Степень конверсии – 34,41%
- Полимеризация – 20 сек

Оттенки: A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, A02, A03


Упаковка:

- 2 шприца по 2 г
- Канюли - 8 шт


Прочность на сжатие (МПа)

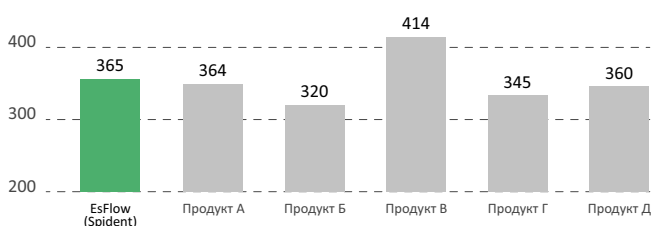


Прочность на изгиб (МПа)

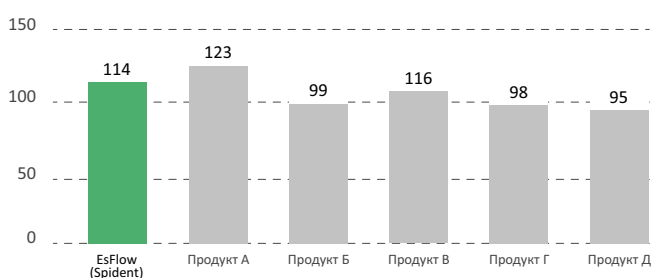


Светочувствительность 8000 лк(сек)

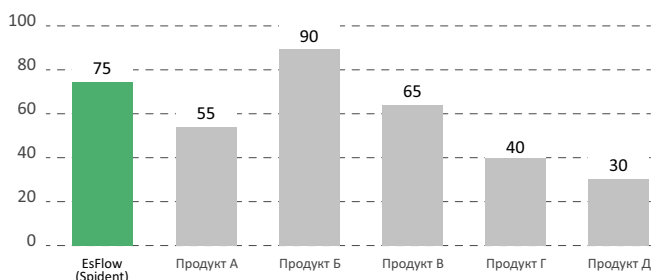

Усадка при фотополимеризации (%)

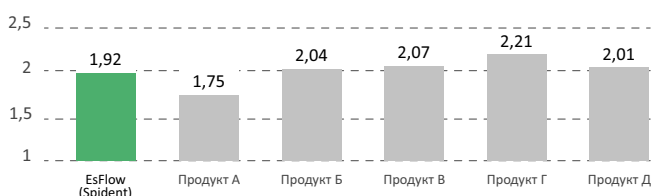

Универсальный наногибридный композиционный материал

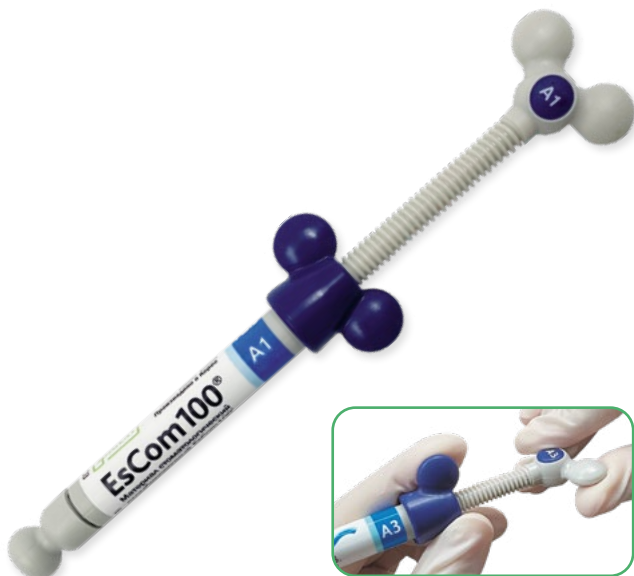

EsCom 100


Показания:
Реставрации I-V класс.

Характеристики материала:


- Эффект «хамелеон»
- Рентгеноконтрастен
- Держит форму до полимеризации
- Превосходная адаптация в полости рта
- Отличная полируемость
- Стойкость сухого блеска
- Высокая наполненность – 77 %
- Средний размер частиц от 16 нм до 1,2 мкм
- Полимеризация – 20 сек

Упаковка:
Отдельно шприц:
• 1 шприц - 4 г


Прочность на сжатие (МПа)

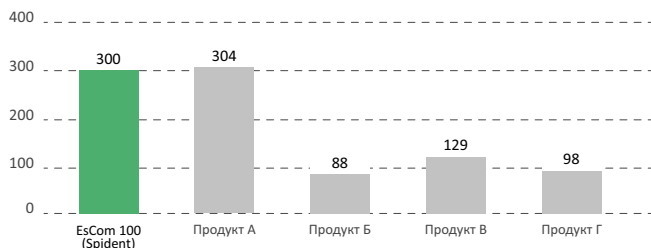


Прочность на изгиб (МПа)

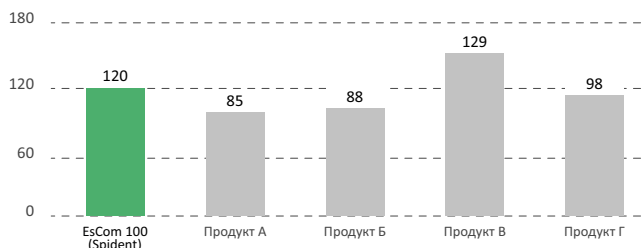

Светочувствительность (при недостаточном освещении)

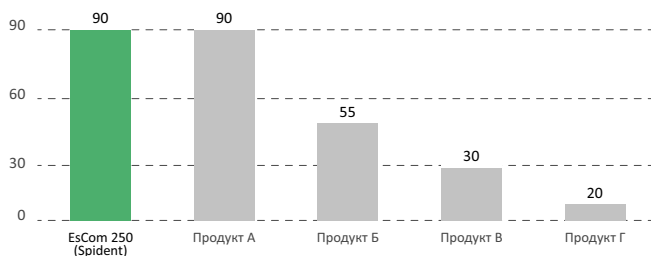


Усадка при фотополимеризации за 20 секунд (%)

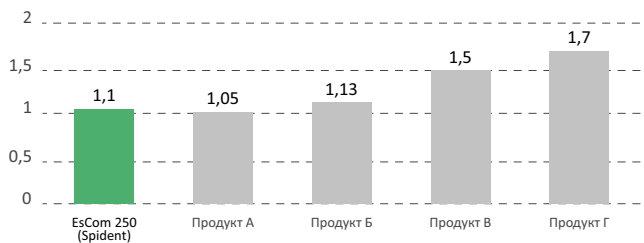

Наногибридный композит


Благодаря использованию наполнителей как большого, так и малого размера, EsCom100 обладает меньшим износом и превосходной прочностью.

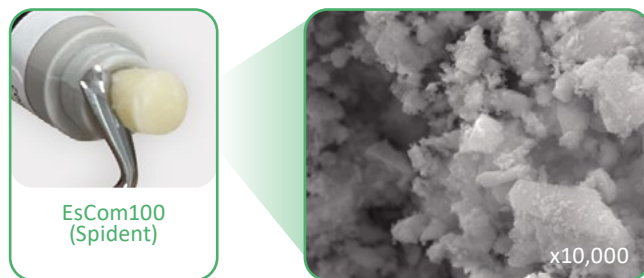

Полимеризация в зависимости от оттенков

Оттенки		Глубина слоя	Время полимеризации
Боди	A1, A2, A3, A3,5, A4, B1, B2, C2	2,0 мм	20 сек.
Опак	AO2, AO3	1,5 мм	40 сек.
Универсальная эмаль	TW	1,5 мм	20 сек.

Шкала оттенков

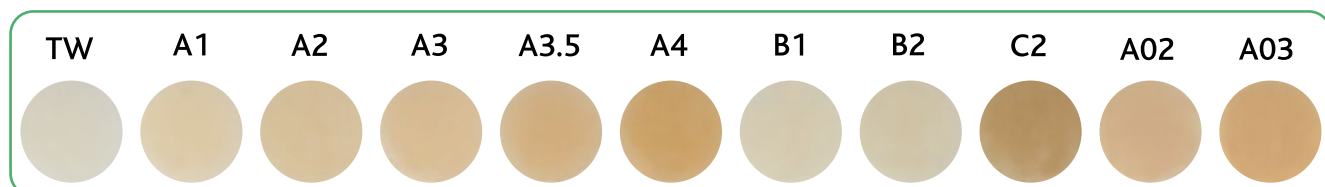

Универсальный наногибридный композиционный материал



Упаковка:

Малый набор: EsCom 100 Kit 5

EsCom 100	A1, A2, A3, A3.5, B2	шприцы по 4 г
FineEtch 37%	1	шприц - 5 мл
EsBond	1	флакон - 5 мл




Упаковка:

Большой набор: EsCom 100 Kit 8

EsCom 100	A1, A2 x 2, A3 x 2, A3.5, B2, A03	шприцы по 4 г
-----------	-----------------------------------	---------------

Скорость уменьшения массы (%)

Высокая износостойкость EsCom 100 обеспечивает высокую прочность при длительном восстановлении.

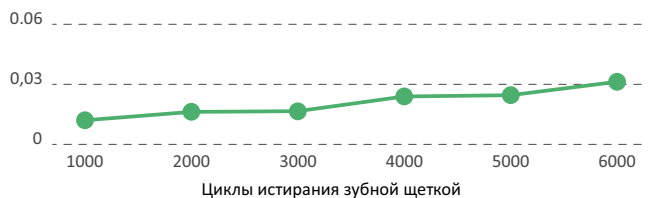

Клинический случай 1



Клинический случай 2



Клинический случай 3





EsCom 250


Показания:
Реставрации I-V класс.

Характеристики материала:


- Эффект «хамелеон»
- Рентгеноконтрастен
- Держит форму до полимеризации
- Превосходная адаптация в полости рта
- Отличная полируемость
- Стойкость сухого блеска
- Высокая наполненность – 78%
- Средний размер частиц от 16 нм до 1,2 мкм
- Полимеризация – 20 сек

Упаковка:
Отдельно шприц:
• 1 шприц - 4 г


Прочность на сжатие (МПа)

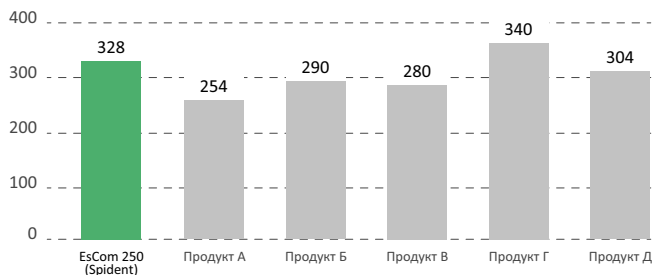


Прочность на изгиб (МПа)

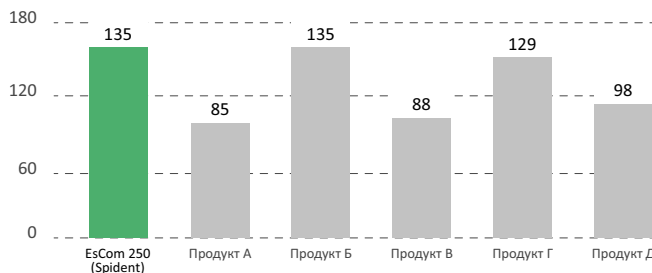

Светочувствительность (при недостаточном освещении)

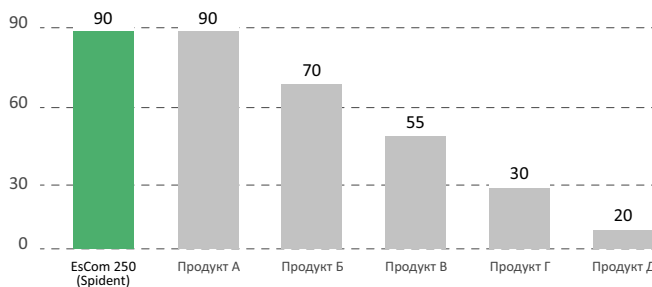

Усадка при фотополимеризации за 20 секунд (%)

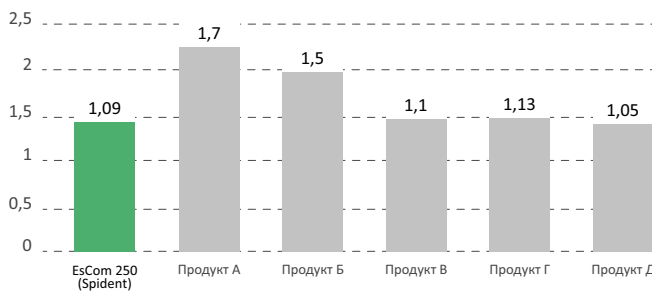

Полимеризация в зависимости от оттенков


Оттенки		Глубина слоя	Время полимеризации
Боди	A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, D2, C2	2,0 мм	20 сек.
Опак	A02, A03	1,5 мм	40 сек.
Придесневой	G1	1,5 мм	40 сек.
Универсальная эмаль	TW	1,5 мм	20 сек

Наногибридный композит

Благодаря использованию наполнителей как большого, так и малого размера, EsCom250 обладает меньшим износом и превосходной прочностью.




EsCom250
(Spident)

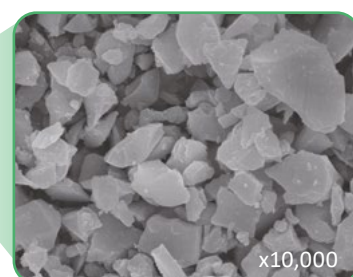

x10,000

Шкала оттенков

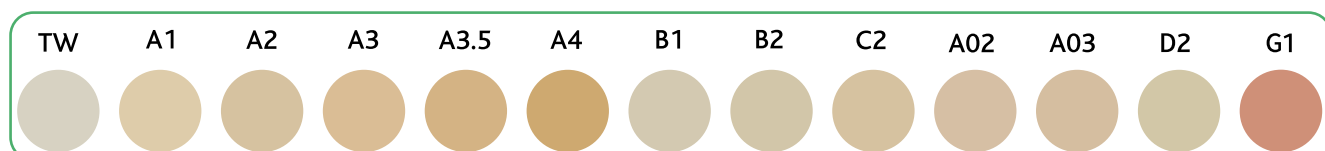

Универсальный наногибридный композиционный материал




Упаковка:

Малый набор: EsCom 250 Kit 5

EsCom 250	A1, A2, A3, A3.5, B2	шприцы по 4 г
FineEtch 37%	1	шприц - 5 мл
EsBond	1	флакон - 5 мл

Выдающаяся износостойкость

Нанонаполнители распределены равномерно и имеют очень низкую шероховатость поверхности, благодаря более мелким частицам он обладает исключительной износостойкостью.

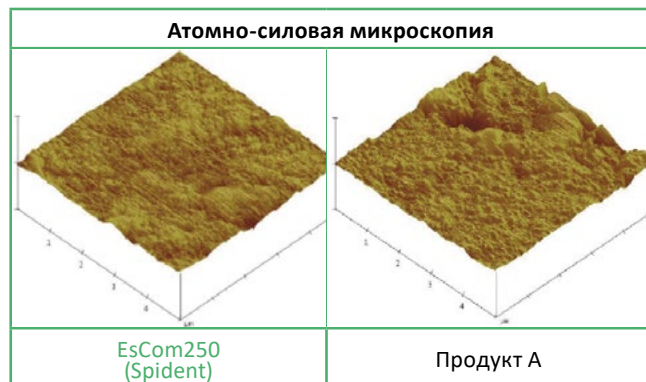


Упаковка:

Большой набор: EsCom 250 Kit 8

EsCom 250	A1, A2 x 2, A3 x 2, A3.5, B2, AO3	шприцы по 4 г
-----------	-----------------------------------	---------------

Скорость уменьшения массы (%)

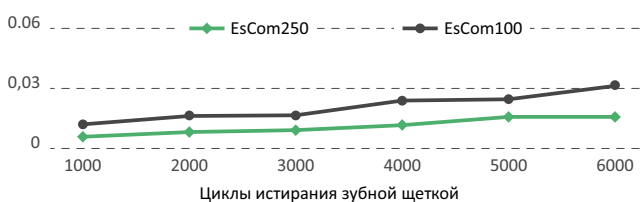


Сохранение формы



Клинический случай 1




Клинический случай 2

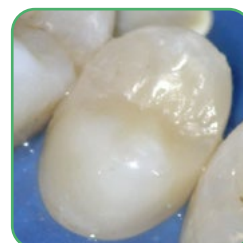


Композиционный материал двойного отверждения



Глубина отверждения (mm)

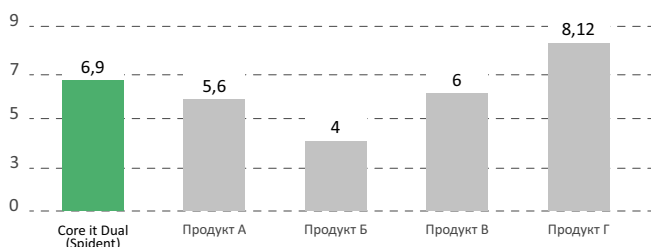

Усадка при фотополимеризации (%)

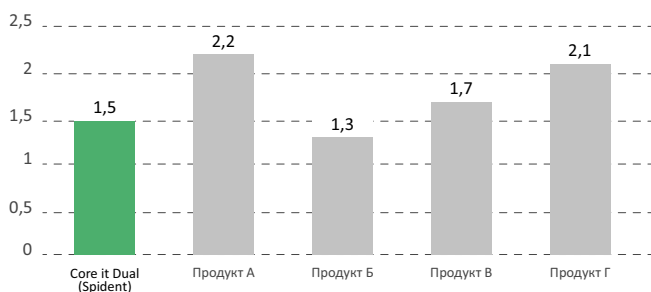

Core•it Dual

Показания:

- Для восстановления частично или сильно разрушенной коронковой части витальных или девитализированных зубов
- Фиксация стекловолоконных и анкерных штифтов

Характеристики материала:

- Препарируется как дентин
- Однородность в процессе обточки
- Надежная стабильность под коронкой
- Оптимальная адаптация
- Прямое внесение с помощью эндо-насадок
- Специально разработано для корневых каналов
- Текучесть по шкале – 3
- Толщина отсвечивания – 3,81 мм
- Рабочее время – 1:30 мин
- Полное время застывания – 5 мин
- Полимеризация – 20 сек

Упаковка:

Малый набор: Core it Dual

Core it Dual	2	шприцы по 10 г
Смешивающие насадки	12	

Цвета:

Белый, Голубой, Жёлтый


Упаковка:

Core it Dual Automix	1	катридж - 50 г
----------------------	---	----------------


Цвет:

Жёлтый


Прочность на сжатие (МПа)

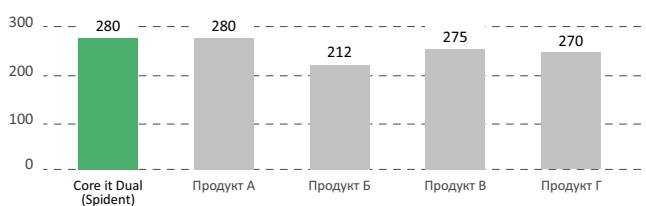

Прочность на растяжение (МПа)

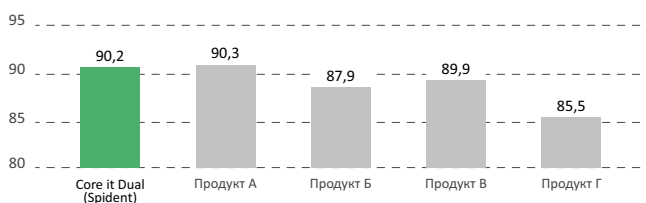

Рентгеноконтрастность (mmAl)

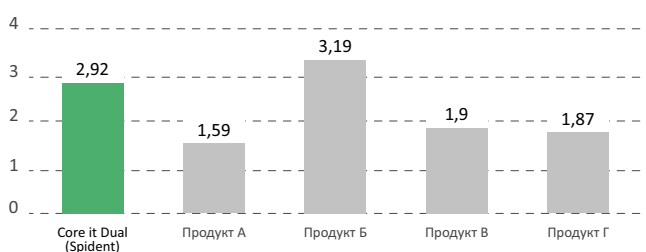

Композиционный материал двойного отверждения



Смешайте в соотношении 1:1

Адгезивы 6-го и 7-го поколения обладают высокой кислотностью - с Core • it Dual использовать не рекомендуем.

Мы рекомендуем применять активатор (EsBond activator) для снижения кислотности адгезива, чтобы компоненты Core•it Dual не теряли активность из-за повышенной кислотности адгезива.

Из-за высокой кислотности адгезива, на границе между адгезивом и Core•it Dual, компоненты амины и Benzoyl Peroxide, которые являются инициаторами полимеризации Core•it Dual, вступают в кислотно-щелочную реакцию перед полимеризацией и теряют свою активность в качестве инициаторов. Это может привести к нарушению адгезии.

Упаковка:

Большой набор: Core it Dual System Kit

Core it Dual	жёлтый x 2	шприцы по 10 г
FineEtch 37%	1	шприц - 5 мл
EsBond	1	флакон - 5 мл
EsBond Activator	1	флакон - 5 мл
Смешивающие насадки	12	
Кисточки	30	
Держатель для кисточки	1	
Блок с защитой от света	1	

Применение




1. Подготовьте место для штифта.



2. Промойте и просушите канал струёй воздуха и бумажными пинами.




3. Нанести EsBond + EsBond Activator.

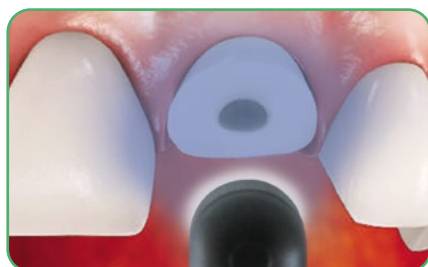

4. Просушите в течении 20 сек.
Полимеризация 20 сек.



5. Обработайте штифт силаном.

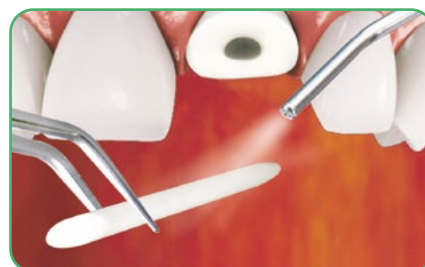


6. Просушите штифт средней струёй воздуха в течении 20 сек.



7. Внесите Core it Dual в пространство, подготовленное под штифт.




8. Установите штифт.
Полимеризация 20 сек.

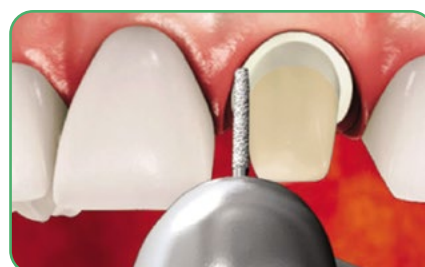

9. Самоотверждение через 5 мин.


Светоотверждаемый прокладочный материал

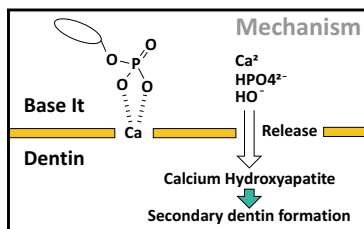

Адгезивный интерфейс. Размер оптической микроскопии (x 50)




Применение

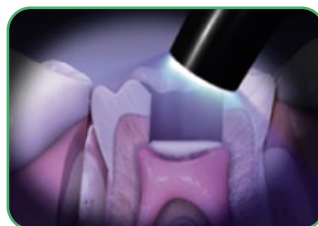

Светоотверждаемый герметик для запечатывания фиссур



Эффект

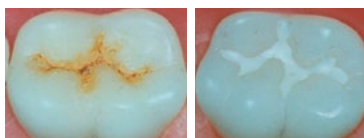

Применение



Base•it

Показания:

Предназначен для применения в качестве барьера и для защиты пульпы в любых глубоких полостях. Уникальная гидрофильная смола, входящая в состав материала, создает стабильный и прочный защитный слой.

Характеристики материала:

- Щелочное Ph способствует заживлению, стимулирует выделение гидроксиапатита
- Защищает и изолирует пульпу
- Влагостойкий и рентгеноконтрастный
- Материал показан для случаев вскрытой пульпы, включая кариозное вскрытие, механическое вскрытие или вскрытие в результате травмы, после остановки кровотечения.
- Полимеризационная усадка – 2,26 %
- Глубина слоя – не более 2 мм
- Полимеризация – 20 сек

Упаковка:

- 4 шприца по 2 г
- Канюли - 8 шт

Seal•it

Показания:

Профилактика кариеса способом запечатывания фиссур.

Характеристики материала:

- Герметизация фиссур
- Реставрация небольших кариозных повреждений
- Белый цвет для простоты визуального контроля
- Отличная краевая адаптация
- Полимеризационная усадка – 3,5 %
- Адгезия к эмали - не более 15 МПа
- Прочность на сжатие – 350 МПа
- Полимеризация – 20 сек

Цвет: Белый

Упаковка:

- 2 шприца по 1,2 мл
- Канюли - 8 шт



FineEtch

Показания:

Используется для тотального протравливания эмали и дентина при прямых и непрямых реставрациях.


Характеристики материала:

- Удаление «смазанного» слоя ткани дентина
- Раскрытие дентинных трубочек
- Растворение неорганических компонентов межколлагеновых пространств
- Ярко выраженный цвет для более четкого визуального контроля
- Протравливание дентина – 5 сек
- Протравливание эмали – 15 сек

Упаковка:

- 3 шприца по 5 мл
- Канюли - 8 шт

Перед использованием FineEtch		После	
Эмаль			
Дентин			

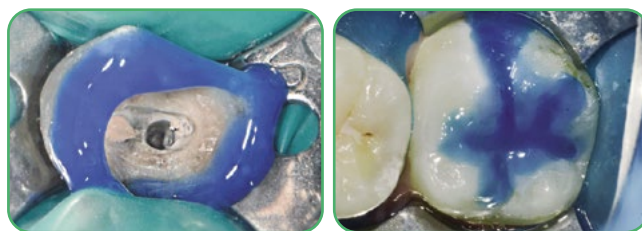

Высокая вязкость обеспечивает точное нанесение

Коффердам жидкий светового отверждения



FineDam

Показания:

- Изоляция зуба
- Защита десны






Характеристики материала:

- Голубой цвет
- Легко извлекается в один прием
- Высокоэластичен
- Прочность на изгиб – 50 МПа
- Полимеризация – 20 сек

Упаковка:

- 4 шприца по 1,2 мл
- Канюли - 8 шт

Применение

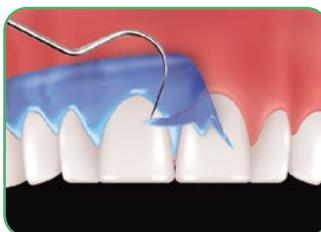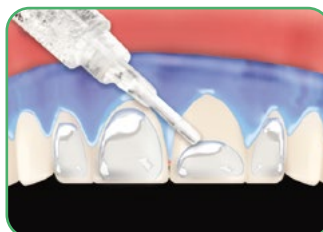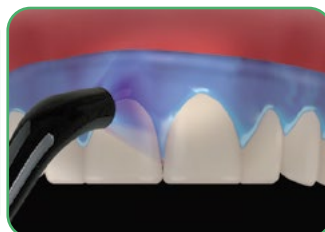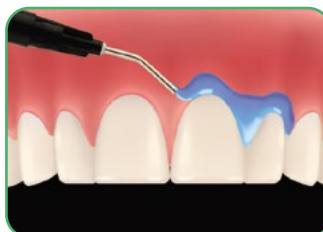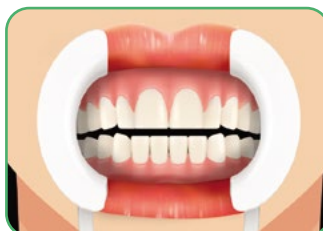

Если резиновая прокладка не прилегает плотно к подготовленным зубам, нанесите на нее небольшое количество FineDam.


Материалы стоматологические для пломбирования каналов

pH: 12,4 pH

Растворимость: 3 %

Текущность: 23 mm

Рентгеноконтрастность: 6 mmAl

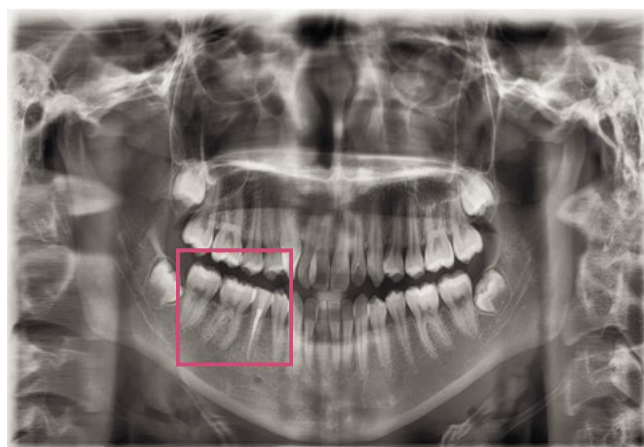

Изображение зубов панорамной рентгенографии

VioPex

Показания:

Пломбировочный материал для корневых каналов с великолепной рентгеноконтрастностью, мощным бактерицидным эффектом.

Характеристики материала:

- При случайном вскрытии пульпы и при пульпотомии
- При негерметичности канала
- При инактивации микробного инфильтрата в инфицированных каналах
- При апексфиксации
- При формировании защитного твердотканевого барьера при перфорациях, оссификации, в областях резорбции костной ткани
- При лечении каналов зубов с несформированным апексом в молочных зубах и при периодонтитах
- Как постоянный пломбировочный материал для инфицированных корневых каналов

Преимущества:

Йодоформ значительно усиливает бактерицидный эффект. pH – 12,4 (не опускается ниже 12 даже через 9 дней после первичного введения в канал). Очаг воспаления становится практически полностью стерильным через 48 часов. Гибнет до 99% патогенной микрофлоры.

Упаковка:

- 1 шприц - 2,2 г
- Насадки - 21 шт



Обтурация зуба № 45

Рабочее время: 70 мин (23°C, 55 %)

Время застывания: 120 мин (37°C, 98 %)

Текущность: 21 mm



VioSeal

Показания:

Пастообразный полиэпоксидный полимер, использующийся в качестве герметизирующего материала для корневых каналов. Его химический состав обеспечивает отличную биосовместимость, тогда как физические свойства материала способствуют полностью герметичному пломбированию в сочетании с гуттаперчевыми штифтами.


Характеристики материала:

- Экстра быстрый в применении
- Компоненты смешиваются в идеальной, гомогенной пропорции
- Не окрашивает структуру зуба
- Хорошая биосовместимость
- Использование метода одного штифта
- Техника латеральной конденсации,
- Техника горячей и холодной обтурации.


Упаковка:

- 1 шприц - 10 г
- Смешивающие насадки - 6 шт


Рентгеноконтрастность (mmAl)

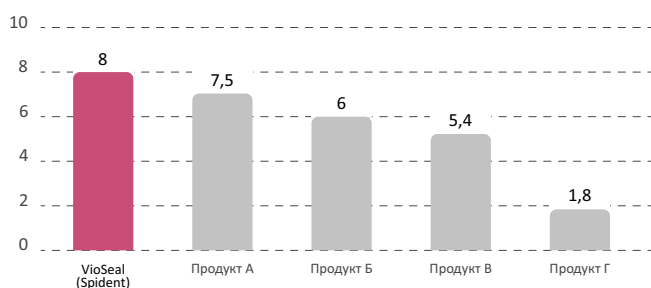

Растворимость (%)

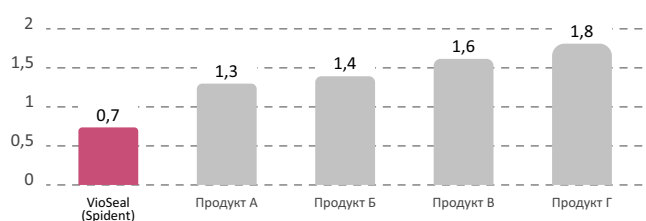

РН: 12,7 рН
Растворимость: 3 %
Текучесть: 22 мм
Рентгеноконтрастность: 7.8 mmAl

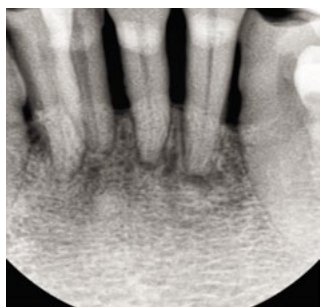

Предоперационная рентгенограмма, показывающая периапикальную рентгенопрозрачность относительно не полностью сформированных мезиальных и дистальных корней зуба № 32.



Апексификация гидроксидом кальция проводится в мезиальных и дистальных корешках с разрешением периапикальной рентгенопрозрачности

VioPaste

Показания:

Временный пломбировочный материал для корневых каналов с великолепной рентгеноконтрастностью

Характеристики материала:

- Рентгеноконтрастность
- Мощный и стойкий антибактериальный эффект за счет создания высокого уровня РН
- До 99 % патогенной микрофлоры гибнет в первые 48 часов после пломбировки инфицированных каналов
- Лечение некротических и гангренозных форм пульпита.
- Лечение инфицированных каналов при деструктивных формах периодонтита.
- Лечение внутренней и наружной резорбции корня.
- Формирование апикального барьера и апексификация в детской стоматологической практике.
- Для прямого покрытия коронковой и корневой пульпы при пульпотомии

Упаковка:

- 1 шприц - 2 г
- Насадки - 21 шт

Материал стоматологический (крем) для обработки корневых каналов с ЭДТА

SoftPrep

Показания:

Расширение, очистка и смазка корневых каналов.

Характеристики материала:

- 17 % ЭДТА, водорастворимый на 100%
- Значительно облегчается поиск кальцифицированных устьев каналов и их вскрытие
- Облегчает прохождение, очистку и формирование облитерированных корневых каналов
- Удаляются живая и некротизированная пульпарная ткань, опилки корневого дентина и другие инфицированные органические частицы
- Прекрасно сочетается в совместном использовании с апекслокаторами
- Превосходный бактерицидный эффект
- Использование в качестве лубриканта при инструментальной обработке

Упаковка:

- 2 шприца по 6 г
- Канюли - 8 шт



водорастворимый



0 сек.



30 сек.




60 сек.



нет осадка

Применение

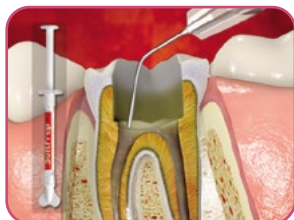

Однокомпонентный адгезив V-го поколения



EsBond

Показания:

Адгезив для различных пломбировочных материалов.

Характеристики материала:

- Может использоваться для техники «влажного бондинга»
- Высокая степень адгезии
- Высокая сила адгезии как при влажном, так и при сухом дентине
- Превосходное краевое прилегание, которое обеспечивает высокое качество эстетической реставрации
- Толщина плёнки – 50 мкм
- Сорбция воды – 40 мкг/мм³
- Растворимость – 7,5 мкг/мм³
- Прочность бондинга к дентину – 20 МПа
- Прочность бондинга к эмали – 21 МПа
- Ph – 2,4 %
- Полимеризация – 20 сек

Упаковка:

- 1 флакон – 5 мл

Иглы инъекционные дентальные стерильные однократного применения



NOP


- Легко определить толщину иглы по цвету канюли
- Европейский шаг резьбы
- Силиконовое покрытие игл позволяет значительно уменьшить болевые ощущения и вероятность травмы тканей
- Легкое определение положения острия иглы достигается при помощи ориентационной метки на канюле иглы

Упаковка:

- 1 коробка - 100 шт.



31G/XS (0.26x12mm)	30G/XS (0.3x12mm)	30G/S (0.3x16mm)	27G/S (0.4x21mm)	30G/S (0.3x21mm)	30G/L (0.3x25mm)	27G/L (0.4x30mm)	27G/L (0.4x35mm)	27G/L (0.4x38mm)
-----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

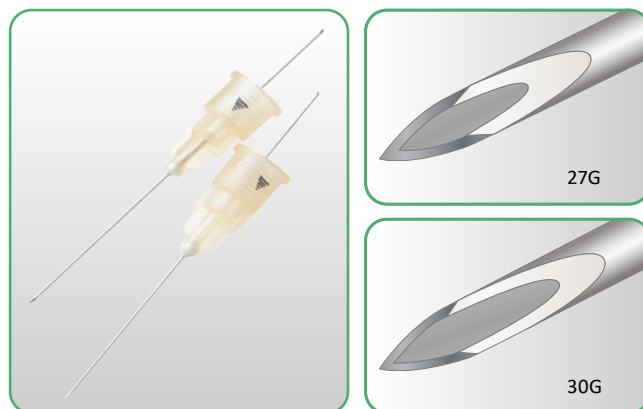



Hexa-Temp

Показания:

Самоотверждаемый материал для временных коронок и мостов. Изготовление эстетичных временных коронок, мостов, вкладок и накладок.


Характеристики материала:

- Простое придание формы и полировка
- Долгосрочные временные протезы
- Система автоматического смешивания в картридже 1:1
- Влагопоглощение: 40 мкг/мм³
- Адгезивная прочность - 7,7 МПа
- Прочность на сжатие - 330 МПа
- Прочность на изгиб - 73 МПа
- Усадка - 2,6%
- Рабочее время - 1:30 мин
- Время установки - 2:30 мин

Оттенки: TW, A1, A2, A3

Упаковка:




- 1 картридж - 75 г
- Смешивающие насадки

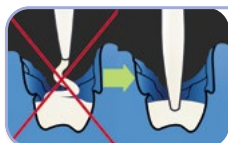

! Внимание !

Обязательно заполняйте снизу и всегда держите насадку для смешивания внутри материала (Hexa-Temp), чтобы предотвратить образование пустот.

Применение

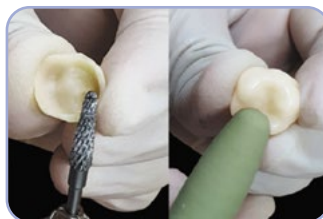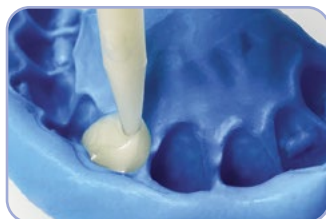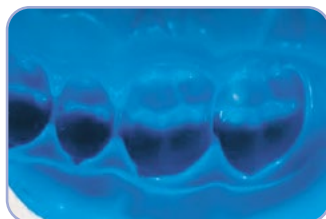

Слепочные ложки









Bitetray

Частичные сетчатые ложки для одномоментного снятия оттиска с верхней и нижней челюстей

Упаковка:

- G-1 (1 коробка - 50 шт.)
- G-2 (1 коробка - 50 шт.)
- G-3 (1 коробка - 50 шт.)
- G-4 (1 коробка - 30 шт.)
- G-5 (1 коробка - 30 шт.)

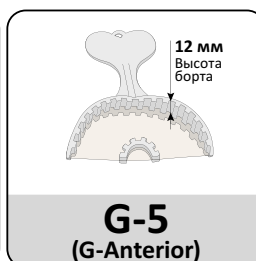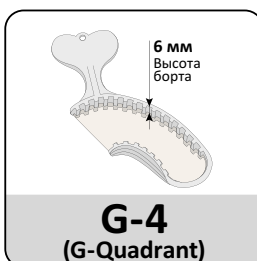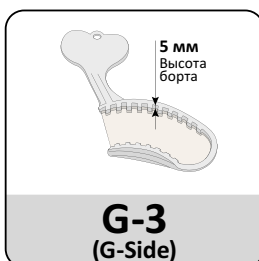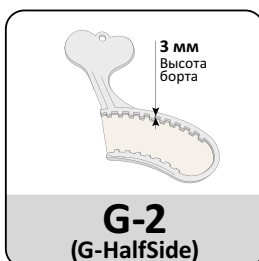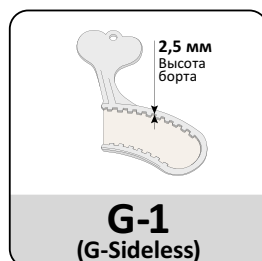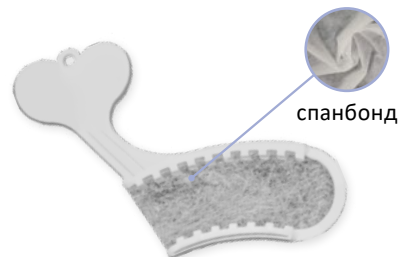

Цемент для временной фиксации ортопедических конструкций



EsTemp NE

Показания:

Временная фиксация ортопедических конструкций.

Характеристики материала:

- Гипоаллергенный, приятный запах лимона
- Не содержит эвгенол
- Легкое удаление излишков материала
- Точная посадка благодаря малой толщине пленки материала
- Толщина плёнки – 2 мкм
- Рабочее время – 1:10 мин
- Время застывания – 5 мин
- Цвет - белый

Упаковка:

- 2 шприца по 10 г

Применение



EsTemp Implant

Показания:

Временный композитный цемент для фиксации на длительный срок постоянных и временных реставраций на имплантах.

Характеристики материала:


- Обеспечивает прочное крепление
- Рентгеноконтрастность
- Низкая растворимость в слюне
- Не имеет вкуса и запаха
- Прочность на растяжение – 10 МПа
- Прочность на сжатие – 350 МПа
- Толщина плёнки – 14 мкм
- Рабочее время – 1:10 мин
- Время застывания – 3:30 мин
- Полимеризация – 10 сек

Не содержит эвгенола. Начальное отверждение характеризуется резиноподобной консистенцией, в этот момент лишнее части цемента можно с легкостью удалить, воспользовавшись щупом.


Упаковка:

- 1 шприц - 8 г
- Смешивающие насадки - 6 шт

Применение

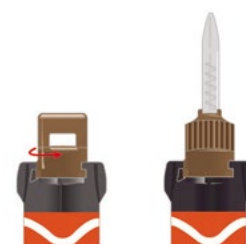


Применение насадки для смешивания

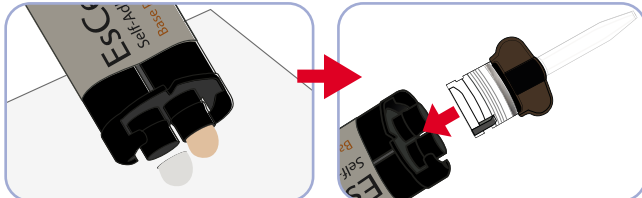


Перед установкой насадки для смешивания выдавите небольшое количество пасты, чтобы обеспечить равномерное вытекание из шприца.


Прочность на изгиб (МПа)

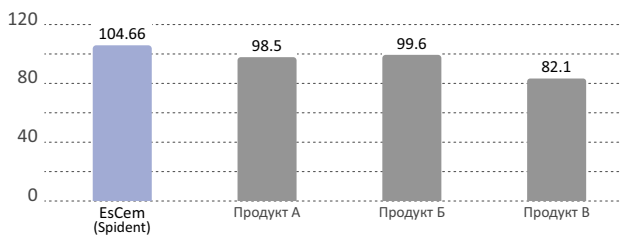

Прочность на сжатие (МПа)

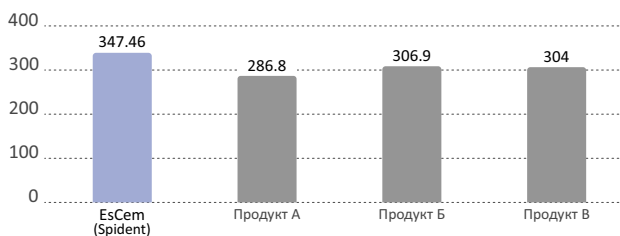

Прочность на сцепление, стеклокерамика (МПа)

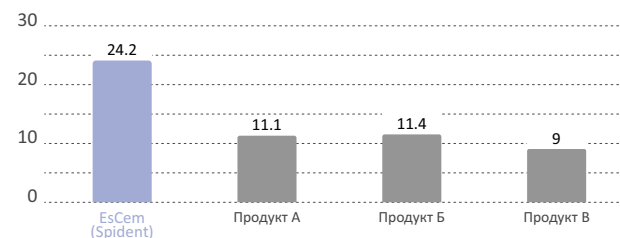

EsCem

Показания:

Самоадгезивный, самопротравливающий, композитный цемент двойного отверждения. Он содержит MDP адгезивный мономер, для улучшения долговечности и химического взаимодействия с твердыми тканями.

Характеристики материала:

- Цементирование реставраций на абатментах имплантов
- Постоянная фиксация металлических, цельнокерамических, композитных коронок, мостов, вкладок и накладок
- Металлических (анкерных, литых) и стекловолоконных штифтов
- Отсутствуют этапы протравливания и бондинга
- Нулевая растворимость и низкий коэффициент расширения
- Рентгеноконтрастный
- Полимеризационная усадка – 2,41 %
- Рабочее время – 1 мин
- Полное время застывания – 3 мин


Упаковка:

- 1 шприц – 8 г
- Смешивающие насадки


Оттенки:



Толщина плёнки (мкм)

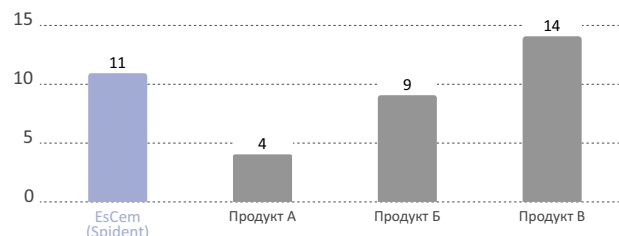

Прочность на сцепление, цирконий (МПа)

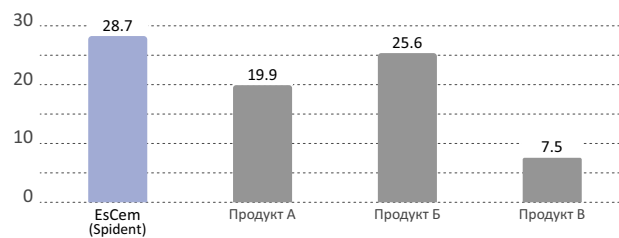

Применение



1. Промойте и высушите коронку.



2. Поместите насадку для смешивания и нанесите EsCem непосредственно в коронку.



3. Полное самоотверждение 3 минуты

Поливинилсилоксановые оттискные массы (А-силиконы)

Рабочее время: 2 мин.
Время установки: 4 мин.



! Внимание !
Пожалуйста, используйте нитриловые, виниловые перчатки или чистые руки, так как латексные перчатки могут препятствовать затвердеванию материала.

I-Sil Putty

Показания:

Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок

Характеристики материала:

- Устойчивость к деформациям
- Возможность изготовления из одного оттиска нескольких моделей
- Отсутствие неприятного вкуса и запаха
- Нетоксичность, гипоаллергенность
- Легкое извлечение из полости рта
- Высокая тиксотропность
- Высокая гидрофильность
- Твердость по Шору А – 70
- Деформация при сжатии – 2 %
- Эластичное восстановление после деформации > 99,66 %
- Изменение линейных размеров за 24 часа – 0,20 %
- Расход материала: примерно на 14 слепков.

Упаковка:

- 2 банки по 290 мл

Рабочее время: 1.30 мин.
Время установки: 4 мин.



I-Sil Light

Показания:

Оттиски для коронок и мостов, вкладок и накладок

Характеристики материала:

- Отличные свойства гидрофильности
- Текучая вязкость
- Техника двухфазного двухслойного слепка «сэндвич»
- Техника снятия однофазного двухслойного слепка
- Твердость по Шору А – 58
- Деформация при сжатии – 3 %
- Эластичное восстановление после деформации > 99,60 %
- Изменение линейных размеров за 24 часа – 0,16 %

Цвет: Pink

Упаковка:

- 2 картриджа по 50 мл
- Смешивающие насадки - 8 шт
- Intraoral tips - 4 шт

Применение



Рабочее время: 1.20 мин.
Время установки: 2.40 мин.



! Внимание !
Пожалуйста, используйте нитриловые, виниловые перчатки или чистые руки, так как латексные перчатки могут препятствовать затвердеванию материала.

I-Sil Putty Fast

Показания:

Оттиски для мостовидных протезов, коронок, вкладок.

Характеристики материала:

- Устойчивость к деформациям
- Возможность изготовления из одного оттиска нескольких моделей
- Отличная адгезия между слоями
- Отсутствие неприятного вкуса и запаха
- Нетоксичность, гипоаллергенность
- Легкое извлечение из полости рта
- Высокая тиксотропность
- Высокая гидрофильность
- Твердость по Шору А – 70
- Деформация при сжатии – 2 %
- Эластичное восстановление после деформации > 99,40 %
- Изменение линейных размеров за 24 часа – 0,20 %
- Расход материала: примерно на 14 слепков

Упаковка:

- 2 Банки по 290 мл

Рабочее время: 1.20 мин.
Время установки: 2.40 мин.



I-Sil Light Fast

Показания:

Оттиски для коронок и мостов, вкладок и накладок.


Характеристики материала:

- Отличные свойства гидрофильности
- Текучая вязкость
- Доступны формы нормальной и ускоренной полимеризации
- Техника двухфазного двухслойного слепка «сэндвич»
- Техника снятия однофазного двухслойного слепка
- Твердость по Шору А – 58
- Деформация при сжатии – 3 %
- Эластичное восстановление после деформации > 99,40 %
- Изменение линейных размеров за 24 часа – 0,16 %

Упаковка:

- 2 картриджа по 50 мл
- Смешивающие насадки - 8 шт
- Intraoral tips - 4 шт

Применение

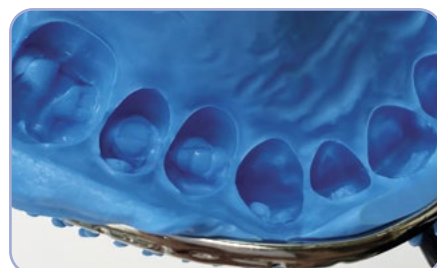

Поливинилсилоксановые оттисковые массы (А-силиконы)

Рабочее время: 1.30 мин.
Время установки: 4 мин.



Применение



I-Sil Heavy

Показания:

Оттиски для коронок и мостов, вкладок и накладок, все типы погружных оттисков, например для имплантантов

Характеристики материала:

- Слпки с применением индивидуальных ложек
- Твердость по Шору А – 70
- Деформация при сжатии – 3,5%
- Эластичное восстановление после деформации > 99,60 %
- Изменение линейных размеров за 24 часа – 0,20 %

Упаковка:

- 2 картриджа по 50 мл
- Смешивающие насадки - 8 шт

Рабочее время: 1.30 мин.
Время установки: 4 мин.



Применение



I-Sil Regular

Показания:

Одноэтапный, однофазный оттиск. При однофазном оттиске материал и в ложке, и в шприце один и тот же.

Характеристики материала:

- Твердость по Шору А – 60
- Деформация при сжатии – 2 %
- Эластичное восстановление после деформации > 99,60 %
- Изменение линейных размеров за 24 часа – 0,13 %

Упаковка:

- 2 картриджа по 50 мл
- Смешивающие насадки - 8 шт

Рабочее время: 30 сек.
Время установки: 1.30 мин.



I-Sil Bite

Показания:
Регистрация прикуса

Характеристики материала:

- Очень высокая прочность
- Минимальное сопротивление при смыкании
- Быстрое отверждение
- Твердость по Шору А – 85
- Изменение линейных размеров за 24 часа – 0,06 %

Упаковка:

- 2 картриджа по 50 мл
- Смешивающие насадки - 12 шт.

Применение



Слепочные ложки










Bitetray

Частичные сетчатые ложки для одномоментного снятия оттиска с верхней и нижней челюстей

Упаковка:

- G-1 (1 коробка - 50 шт.)
- G-2 (1 коробка - 50 шт.)
- G-3 (1 коробка - 50 шт.)
- G-4 (1 коробка - 30 шт.)
- G-5 (1 коробка - 30 шт.)

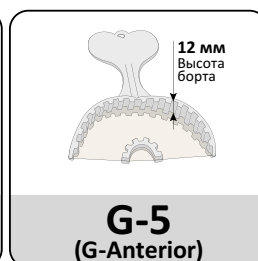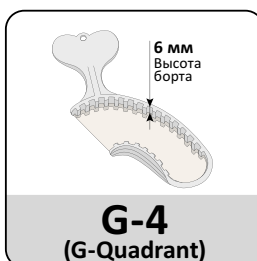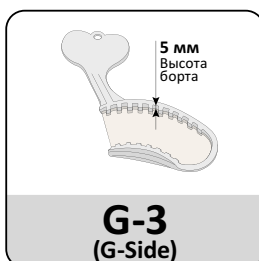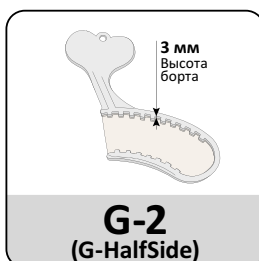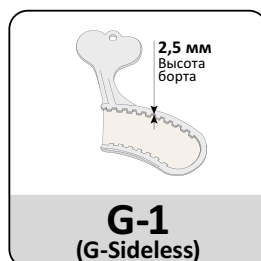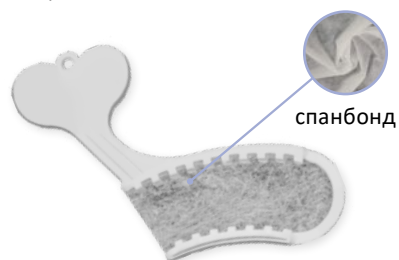

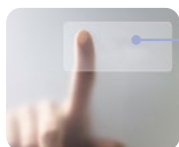

Операция
в одно
касание



Vacu-Mixer

Аппарат для автоматического смешивания оттисковых масс

- Удобное наполнение ложки прямо из аппарата за 10 секунд
- Соотношение 1:1 помогает избежать ошибок
- Работа в одно касание

Технические Данные Vacu-Mixer:

- Размеры Vacu-Mixer - 59 x 82,5 x 270 мм (Д x Ш x В)
- Вес смесителя - 765 г (пустой, без подставки)

Светодиодный дисплей при зарядке (см. таблицу ниже)

Мощность	Светодиодный дисплей
<10%	Мигает красным Зарядка 4 – 5 часов
10%-25%	Красный
25%-75%	Оранжевый
75%-99%	Мигает зеленым
100%	Зеленый

Автоматическое смешивание-
Смешивание с помощью
Vacu-Mixer

Ручное смешивание - Смешива-
ние с помощью пистолета

Стопорное
кольцо


Выпуск
картриджа

Блокировка
картриджа

Пуск/Стоп

Индикатор
поршня


Смесительный
наконечник

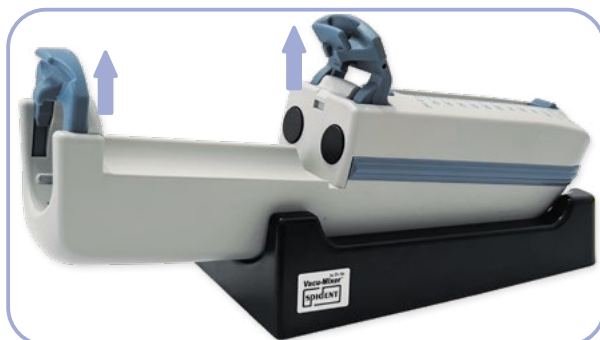

1. Откройте блокировку картриджа, потяните вверх стопорное кольцо, убедитесь, что индикатор поршня в исходном положении.



2. Вставьте картридж в камеру картриджа.

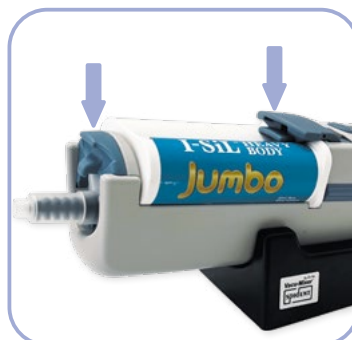

3. Подсоедините новый смесительный наконечник, закройте стопорное кольцо, закройте блокировку картриджа, аппарат готов к работе.

Рабочее время: 1.30 мин.
Время установки: 4 мин.



Fast Рабочее время: 0.40 мин.
Время установки: 2 мин.

I-Sil Jumbo Regular / Heavy

Показания:

Оттискной материал на основе А-силиконов. Используются в качестве картриджей для заправки автоматического смесителя Vacu Mixer

Характеристики материала:

- Точное воспроизведение границы препарирования
- Воспроизведение мельчайших деталей
- Гомогенность
- Расход материала – примерно на 4 слепка

I-Sil Jumbo Regular Body

- Твердость по Шору А – 60
- Эластичное восстановление после деформации > 99,40 %
- Деформация при сжатии – 2 %
- Изменение линейных размеров за 24 часа – 0,13 %

I-Sil Jumbo Heavy Body

- Твердость по Шору А – 70
- Эластичное восстановление после деформации > 99,6 %
- Деформация при сжатии – 3,5 %
- Изменение линейных размеров за 24 часа – 0,20 %

I-Sil Jumbo Heavy Fast Body

- Твердость по Шору А – 70
- Эластичное восстановление после деформации > 99,6 %
- Деформация при сжатии – 3,5 %
- Изменение линейных размеров за 24 часа – 0,20 %

Упаковка:

- 1 картридж - 120 мл


Применение



Нанесите на препарированное место I-Sil Light.



Подготовьте Vacu-Mixer к работе. Наклоните оттискную ложку для ее наполнения. Постоянно наполняйте ложку от одного конца к другому, держа отверстие смесительного наконечника постоянно погруженным в массу.

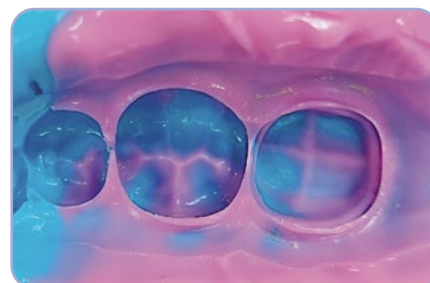


Готовый оттиск – комбинация материалов I-Sil Jumbo Regular и I-Sil Light.

Использования соединителя (Connector):

Разъем, который можно использовать между двумя картриджами.

Этот метод рекомендуется, когда остается небольшое количество оттискного материала - приложите разъем к новому картриджу, в который надо переместить оставшийся оттискной материал, нажмите кнопку пуск.

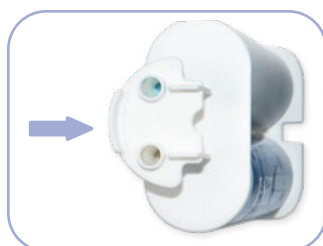



Green Mixing Tips

Соотношение - 1:1
Диаметр – 5 мм
Длина – 88 мм

В упаковке – 50 шт

Используется для:
I-Sil Heavy, I-Sil Regular,
I-Sil Bite Registration



Crown Mixing Tips

Соотношение - 1:1
Диаметр – 1 мм
Длина – 76 мм

В упаковке – 50 шт

Используется для:
Hexa-Temp



Intraoral tips

Yellow Mixing Tips

Соотношение - 1:1
Диаметр – 4 мм
Длина – 70 мм

В упаковке – 50 шт

Используется для:
I-Sil Light, I-Sil Light FAST



Cement Mixing Tips

Соотношение - 1:1
Диаметр – 1 мм
Длина – 49 мм

В упаковке – 50 шт

Используется для:
EsTemp NE, EsTemp Implant, EsCem
VioSeal



Core Mixing Tips

Соотношение - 1:1
Диаметр – 2,5 мм
Длина – 37 мм

В упаковке – 50 шт

Используется для:
Core.it Dual, EsCem



Core Endo Mixing Tips

Соотношение - 1:1
Диаметр – 2,5 мм
Длина – 37 мм

В упаковке – 50 шт

Используется для:
Core.it Dual, EsCem



Jumbo Mixing Tips

Соотношение - 1:1

В упаковке – 50 шт

Используется для:
I-Sil Jumbo Regular
I-Sil Jumbo Heavy



Диспенсер DS50

Соотношение - 1:1, 1:2

Используется для:

I-Sil Light Body, I-Sil Regular Body, I-Sil Heavy Body, I-Sil Bite Registration, Hexa-Temp



Диспенсер DS24

Соотношение - 1:1, 1:2

Используется для:


Core it Dual Automix (картридж)



Диспенсер DS5




Используется для:

Core it Dual, ViOseal, EsTemp, EsTemp Implant, EsCem

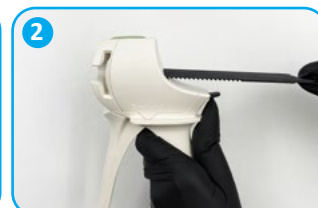

DS Дозатор

Использование DS Дозатора облегчает выдавливание. По маркировке на поршне вы всегда можете проверить оставшееся количество материала

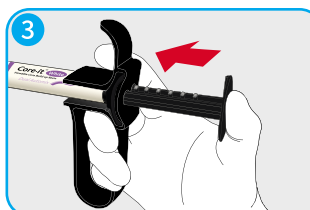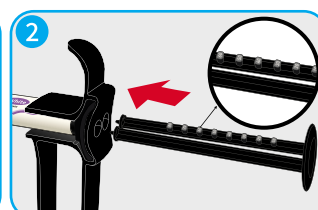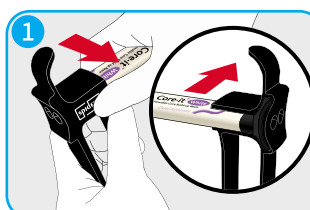



Медицинские одноразовые маски SENSE professional

Трехслойные, с гибким носовым фиксатором на резинках.

Упаковка:

1 упаковка x 50 шт

Цвет: 



Медицинские одноразовые маски SENSE premium

Трехслойные, с гибким носовым фиксатором на резинках. Внутренний слой масок изготовлен из высококачественного спанбонда, отличающегося отсутствием ворсистости.

Упаковка:

1 упаковка x 50 шт

Цвет: 



Слюноотсосы

Слюноотсосы одноразовые. Изготовлены из прозрачного полимерного материала различных цветовых оттенков. Стенка армирована металлической проволокой, позволяющей придавать и удерживать нужную форму. Всасывающая головка наконечника имеет обтекаемую форму с пластичными прорезами, исключающими возможность раздражения слизистой оболочки полости рта пациента и способствует комфортному удалению слюны.

- Закругленный наконечник не содержит острых граней, не травмирует слизистую во рту и может использоваться при больных деснах
- Высокая гибкость и отсутствие узких мест, гарантирующие высокую фильтрационную способность

Упаковка:

- 1 упаковка - 100 шт.



Валики ватные стоматологические SENSE professional

100% адсорбирующий хлопок, отбеленный без применения хлора. Не содержат целлюлозы и синтетических волокон, стерильные.

Размер:

- «М» - 10 x 38 мм
- «S» - 10 x 30 мм

Упаковка:

Обернуты полипропиленовой пленкой по 50 шт, позволяющей автоклавирование. Пленка не плавится, выдерживает давление до 2,2 атм. и температуру до 132 °C

- Размер «М» - 1 упаковка - 2000 шт
- Размер «S» - 1 упаковка - 500 шт
- Размер «S» - 1 упаковка - 2000 шт



Халат одноразовый хирургический, стерильный / нестерильный

Запах халата расположен со спины и фиксируется посредством завязок, приваренных к нетканому полотну сварным швом. «Т-образный» крой рукава, обеспечивает свободу движения.

Характеристики изделия:

- Материал - СМС
- Плотность - 40 ± 5 г/м²
- Длина - 140 ± 4 см
- Размер - 50-52
- Рукав - с эластичными манжетами / на резинке
- Горловина - на завязках
- Метод стерилизации - стерилизация проводится радиационным способом, в соответствии с ГОСТ ISO 11137.

Упаковка:

- Индивидуальная упаковка по 1 шт.

Цвет: голубой



Рукав с манжетами



Рукав на резинке



Одноразовые шапочки - «Шарлотта»

Шапочки-шарлотки производятся с учетом санитарно-гигиенических требований к одноразовой продукции. Они нетоксичны и гипоаллергенны, не доставляют неудобств даже при постоянном ношении и могут использоваться для ежедневного обеспечения личной защиты и гигиены. Изделия имеют универсальный размер и могут различаться цветом и плотностью. Одноразовые шапочки, обладают отличными дышащими свойствами, но при этом практически не пропускают влагу и превосходно защищают от пыли, а также от проникновения вредных веществ.

Состав: гидрофобный нетканый материал, 17 г/м²

Размер: 23"

Упаковка:

- 1 упаковка х 100 шт.

Цвет:



Простыни в рулоне с перфорацией

Простыни в рулоне с перфорацией, нестерильные, одноразовые из нетканого материала.

Размер: 70 x 200 см.

Упаковка:

- 1 рулон х 100 шт.

Цвет:



НАШИ ПАРТНЁРЫ ПО РОССИИ

АНГАРСК	
СВ-ДЕНТАЛ	(3955) 530-800/900
АРХАНГЕЛЬСК	
ЮНИКА-ДЕНТ	(8182) 65-61-26
ОПТИМЕД	(8182) 47-82-77
МУРМАН-МЕДТЕХНИКА	(8182) 20-73-40
АСТРАХАНЬ	
КУТУМ	(8512) 52-54-08
БАРНАУЛ	
СИБИРСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ	(3852) 20-07-81
ОПТИМА +	(3852) 43 77 44
АЗБУКА СТОМАТОЛОГИИ	(3852) 59-24-54
БЕЛГОРОД	
ВЛАДМИВА	(4722) 20-05-55
БЛАГОВЕЩЕНСК	
ИП БУХАНЦЕВА М.А.	(4162) 52-40-75
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД	
ИП САВЕЛЬЕВА М.Ю.	(8162) 61-81-16
ВЛАДИВОСТОК	
СКА 2	(423) 265-05-85
ДЕНТАЛЬ-ПЛЮС	(423) 241-85-10
ДЕНТАЛ-ЭКСПРЕСС	(423) 243-93-91
ВЛАДИКАВКАЗ	
РЕГУЛДЕНТ	(8672) 70-01-82
ВОЛГОГРАД	
ДЕНТАЛ-С	(8442) 52-88-20
МИДГАРД ПЛЮС	(8442) 93-09-02
ВОЛОГДА	
АЛЬЯНС ДЕНТ	(8172) 75-19-02
ВОРОНЕЖ	
МЕДИФАРМ	(4732) 24-65-55
МЕДИКА-СЕРВИС СТ	(4732) 53-24-66
НИКА-СТОМ	(4732) 96-90-22
НЕОДЕНТ	(473) 296-90-22/23
ТД МЕДТОРГ	(4732) 78-24-14
ГРОЗНЫЙ	
МЕДТЕХНИКА	(963) 980-08-07
ЕКАТЕРИНБУРГ	
МАСТЕР ДЕНТ	(343) 287-50-50
МЕГАДЕНТА	(343) 227-27-20
МЕДТОРГ СВ	(343) 200-71-41
МО НОВАЯ БОЛЬНИЦА	(343) 212-90-00
ТД ГАРАНТ	(343) 304-60-07
ПВП КОНТАКТ	(343) 270-00-83
КОМПАНИЯ УРАЛАКТИВ	(343) 221-75-24
ИВАНОВО	
ИВАНОВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ	(4932) 26-46-40/50
ИЖЕВСК	
ИЖЕВСКАЯ МЕДИЦИНА	(3412) 93-01-53
ИЖСТОМТОРГ	(3412) 30-43-70
ЭСТЕТИКА	(3412) 73-55-55
ООО ИЖКОМДЕНТ	(912) 456-17-56
ИРКУТСК	
БЛИК-ТРЕЙД	(3952) 33-45-00
МЕД-ВЕДИ	(3952) 20-87-64
ПВП КОНТАКТ	(3952) 42-38-68
ЙОШКАР-ОЛА	
ДЕНТАЛ-ВИТА	(8362) 56-58-19
КАЗАНЬ	
КРИСТАЛЛ	(843) 272-70-73
НАМИР-Х	(843) 520-77-46
РОКАДА МЕД	(843) 294-59-70
ФИРМА "КАМЕД"	(843) 236-06-91
БУРГАРСТОМАТОРГ	(843) 210-11-99
ООО ДИОН-МЕДСЕРВИС	(843) 200-94-09
КАЛИНИНГРАД	
АРЕКС	(4012) 93-63-99
BALTIC DENTAL	(962) 262-05-62
КЕНИГМЕД	(4012) 53-41-89
КЕМЕРОВО	
СТОМЛЮКС	(3842) 45-20-45
АЛЬСТОМ	(3842) 31-20-20

КИРОВ	
ВЕЛЕСМЕД	(8332) 64-11-11, доб. 105
КИСЛОВОДСК	
ИП ЛОМАЧИНСКИЙ Д.А.	(906) 497-87-55
КРАСНОДАР	
АМК	(861) 259-54-52
ВИСТА ДЕНТ	(989) 818-33-50
МЕДИТОРИЯ	(861) 991-48-80
ОЛИМП ЮГ	(861) 267-44-77
EXDENT	(861) 244-66-04
КАСТОММЕД	(918) 042-54-60 (918) 011-39-41
КРАСНОЯРСК	
МЕДЛАЙН	(391) 218-18-24
ПВП КОНТАКТ	(391) 270-99-77
КУРСК	
МЕДСЕЙЛ +	(909) 234-78-71
ЛИПЕЦК	
МЕДСЕЙЛ +	(906) 597-01-05
МАЙКОП	
ИП ЧЕБОТАРЬ Л.Н.	(961) 531-71-55
МАХАЧКАЛА	
БЕГОМАРКЕТ	(988) 77-44-111
WIKI DENT СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МАГАЗИН	(964) 017-62-59 (928) 516-65-26
ИП МАГОМЕДРАСУЛОВ А.Н. МАГАЗИН ДАНТИСТ	(928) 969-79-65
ДЕНТАЛ Салон	(988) 293-00-10 (8722) 55-11-00
ИП АБАКАРОВ А.И. МАГАЗИН ПРОФДЕНТ	(928) 670-30-32
ИП ОСМАНОВА З.М. СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МАГАЗИН КОРАЛЛ	(903) 423-05-84 (962) 409-04-77
МЕД-ТОРГ	(988) 444-222-8
МОСКВА	
АВЕЛЬДЕНТ	(499) 502-08-30
ДЕНТАЛ ШОП	(495) 737-32-48/49
ДЕНТОМИР	(495) 618-72-70
ЭЛЬ-ДЕНТ	(495) 789-67-39
НОВЫЙ КОЛУМБ 2000	(495) 665-58-48
ГК НИКА ДЕНТ	(495) 645-14-42
ТД ЛЕТО	(495) 504-36-81
СТОМАТОРГ	(495) 330-01-44
ДЕНТАЛ ЭЛИТ ЛАВКА ДАНТИСТА	(495) 755-38-25
МЕГАПОЛИС	(495) 789-89-12/13
СПЕЦМЕДТОРГ	(499) 755 82 44 (903) 788-11-51
НАЗРАНЬ	
МАГАЗИН ESTELITE 21	(938) 011-10-10 (938) 008-10-10
НАЛЬЧИК	
БЕГОМАРКЕТ	(964) 007-88-87
НИЖНИЙ НОВГОРОД	
СИ.ТИ.ДЕНТ	(831) 280-84-24
СТОММАКС	(831) 278-78-13
ТД МЕДТЕХНИКА	(831) 432-59-98
ФЛАЙДЕНТ	(920) 053-22-10
НИЖНЕВАРТОВСК	
ЮНИ-ФАРМ	(3466) 27-02-10
НОВОСИБИРСК	
АРКАДИЯМЕД	(383) 209-07-09
БЕЛЫЙ ГОРОД	(383) 209-13-37
БЛЕКС-ТЕХ	(383) 304-78-48
ПВП КОНТАКТ	(913) 896-92-53
ОБИНСК	
ИП ШЕРИН И.В.	(988) 130-11-22
ОМСК	
РА-МЕД	(3812) 21-22-10
ОРЕЛ	
ВЛАДМИВА	(4862) 72-54-61
ОРЕНБУРГ	
ОРЕНДЕНТ	(3532) 38-53-03
ВИТА	(3532) 90-89-03
ИНКОМ-МЕД	(3532) 38-86-91
ПЕРМЬ	
ИНДЕНТ	(342) 212-33-05
МЕДИКА	(342) 206-59-09
ИП СИДОРОВ В.А.	(342) 238-36-27


ПЯТИГОРСК	
МЕДТОРГ КМВ	(928) 244-44-20
ИП КОПЫЛОВ А.А.	(928) 639-93-41
АВАНГАРД-МЕД	(8793) 36-73-72
РОСТОВ-НА-ДОНУ	
ОЛИМП+	(863) 234-01-01
ДОНМЕДМАРКЕТ	(863) 285-05-00
ИП МЫШАК Т.А.	(928) 988-01-01
СТОМКА	(863) 222-17-43
САМАРА	
ИНВЕРСИЯ	(846) 37-38-000
Е-ДЕНТ	(846) 200-08-81
МЕДИПОЛИС	(846) 202-79-79
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	
ВЕСТ	(812) 317-17-00
ЗУБНАЯ АРХИТЕКТУРА	(812) 449-90-01
МЕДИЦИНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	(812) 449-47-97
ПРОМЕТЕЙ	(812) 605-00-07
СЕВЕРНАЯ КАРОЛИНА	(812) 702-81-12
СИМФОНИЯ МАТЕРИАЛОВ	(812) 928-57-78
САРАТОВ	
АЛЬФА-СП	(8452) 53-44-51
ДЕНТАЛЬ	(8452) 39-81-75
ИП КИРСАНОВ А.Н.	(8452) 45-16-10
СИМФЕРОПОЛЬ	
МЕДРЕГИОН КРЫМ	(978) 800-63-24
СМОЛЕНСК	
ЙЕРА «СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАВКА»	(910) 717-16-60
СТАНДАРТ ПЛЮС	(4812) 64-43-28
СТАВРОПОЛЬ	
СТАТУС-СТ	(8652) 22-50-84
МЕДТОРГ КМВ	(963) 644-44-20
МЕДИЦИНА ДЕНТ	(8652) 73-57-67
ИП ПОГОНИНА Ю.В. ЮДЕНТА	(962) 427-43-93
СТЕРЛИТАМАК	
ГРАНД	(917) 361-27-77
СОЧИ	
ИМПЕРИЯ-ДЕНТ	(862) 227-09-90
ООО «ВИС ДЕНТ»	(988) 144-32-28 (862) 296-57-07
СУРГУТ	
ДЕЛЮКС СЕРВИС	(3462) 99-99-23 (922) 424-24-02
МЕДСЕРВИС	(3462) 93-03-33
СЫКТЫВКАР	
ЗУБНАЯ ГИГИЕНА	(8212) 21-40-99
ТАМБОВ	
ГК НАДЕЖДА-ФАРМ	(4752) 44-08-28
МЕДСЕЙЛ +	(4752) 40-00-01
ТВЕРЬ	
РК-СТОМ	(4822) 75-05-47/57
ЭРКА-СТОМ	(4822) 666-364
ТОЛЬЯТТИ	
СТОМАЛЮКС	(8482) 55-17-27
ПСК	(8482) 95-15-89
ТОМСК	
ЭЛИОН+	(3822) 51-26-31
ТЮМЕНЬ	
МАСТЕР-ДЕНТ-Т	(3452) 60-88-14
МЕГАДЕНТА	(3452) 56-89-11
МИР СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ	(3452) 618-055
УЛЬЯНОВСК	
МЕДТОРГ	(8422) 79-42-14
РОКАДА МЕД	(8422) 22-61-61
УФА	
ОРТОДЕНТ	(347) 212-00-15
РОКАДА МЕД	(347) 224-23-01
ЛИДЕР-СТОМ	(927) 967-90-77
ХАБАРОВСК	
СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ МИР	(4212) 31-51-86
СТОМА-ТРЕЙД	(4212) 31-57-52
ТКАМП ТРЕЙД	(4212) 46-96-60
АМУРСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ	(4212) 45-65-15

ЧЕЛЯБИНСК	
МАСТЕР ФАРМ	(351) 225-65-85
МЕДИПАТ-ЧЕЛЯБИНСК	(351) 260-86-65
ПАКТ-МЕД СЕРВИС	(351) 266-08-08
ЧИТА	
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ «ТРИМЕД»	(3022) 31-88-88
ЧЕБОКСАРЫ	
АРГО МЕДИКАЛ ПРОДАКТС	(8352) 55-44-88
РОКАДА МЕД	(8352) 22-61-10
ШАХТЫ	
ДЕНТА ПЛЮС	(863) 626-23-59
ЯРОСЛАВЛЬ	
ЯРОСЛАВСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ	(4852) 42-95-60/61
ЯКУТСК	
РУНО-СТОМ	(4112) 36-38-34 (4112) 35-10-99


НАШИ ПАРТНЁРЫ РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

МИНСК	
ЧТУП «ВМКДЕНТ»	+375-17 331-13-88 +375-17 331-09-11 +375-17 331-14-30 +375-17 331-12-41
БРЕСТ	
ЧТУП «ВМКДЕНТ»	+375-162 20-66-49 +375-29 720-00-12
ВИТЕБСК	
ЧТУП «ВМКДЕНТ»	+375-212 48-55-20 +375-29 595-03-86
ГОМЕЛЬ	
ЧТУП «ВМКДЕНТ»	+375-232 70-42-31 +375-29 111-05-85
ГРОДНО	
ЧТУП «ВМКДЕНТ»	+375-152 77-32-99 +375-29 789-32-42
МОГИЛЕВ	
ЧТУП «ВМКДЕНТ»	+375-222 222-51-88 +375-44 785-68-02


ПРАЙС

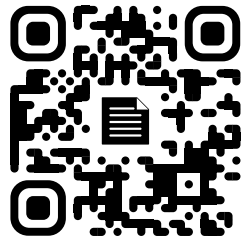

АКЦИИ

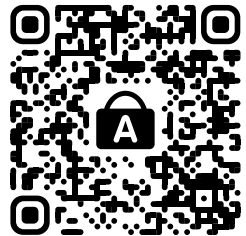


ВКОНТАКТЕ

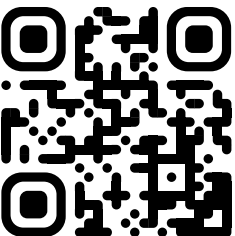


YOUTUBE



INSTAGRAM

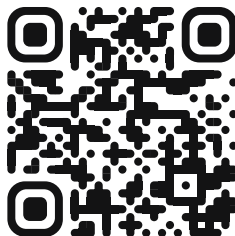

WWW.SPIDENT.RU

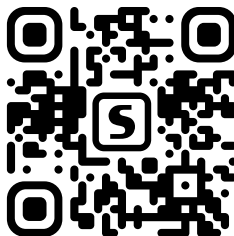

НАШИ КОНТАКТЫ

